

## Ez-Change™(イージーチェンジ)一本入り AB から AD への変更に関するご案内

拝啓

貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

日頃ご愛顧戴いております弊社カプセルフィルターEz-Change™(イージーチェンジ)のエアメント付きにおいて、AB タイプ、AD タイプの 2 種類をラインナップしておりますが、この度、一次側エア抜き機能の優れる AD タイプに統合させて戴くこととなりました。

つきましては、下記内容の通り統合を予定しておりますので、宜しくお取り計らい下さいますよう、お願い致します。

敬具

### 【 記 】

#### 1. 対象機種

##### 現行フィルター型番

- 1) 62.5L-□□□-○○○-△AB
- 2) 125L-□□□-○○○-△AB
- 3) 250L-□□□-○○○-△AB
- 4) 500L-□□□-○○○-△AB

注: □□□ : 品番コード  
△ : Oリングコード

##### 新型フィルター型番

- ⇒ 62.5L-□□□-○○○-△AD  
⇒ 125L-□□□-○○○-△AD  
⇒ 250L-□□□-○○○-△AD  
⇒ 500L-□□□-○○○-△AD

○○○ : 濾過精度コード

##### 現行ハウジング型番

- 1) SIDP-62.5-1-1S-AB
- 2) SIDP-125-1-1S-AB
- 3) SIDP-250-1-1S-AB
- 4) SIDP-500-1-1S-AB
- 5) SMDP-250-◇-1S-AB
- 6) SMDP-500-◇-1.5S-AB

注: 1S : 接続口径 IDF 1S  
1.5S : 接続口径 IDF 1.5S  
◇ : 多本数コード 3 又は 6 が標準本数

##### 新型ハウジング型番

- ⇒ SIDP-62.5L-1-1S-AD  
⇒ SIDP-125-1-1S-AD  
⇒ SIDP-250-1-1S-AD  
⇒ SIDP-500-1-1S-AD  
⇒ SMDP-250-◇-1S-AD  
⇒ SMDP-500-◇-1.5S-AD


## 2. 変更内容

カプセル天面形状を、現行フラット形状から球面ドーム型形状へ変更。同変更に伴い、SIDPホルダー形状も同様に變更され、旧タイプのABホルダーを使用する事ができませんので、ご了承お願い致します。尚、既存ハウジングは、ABホルダーをADホルダーに変更する事で従来通りご使用頂けます。



## 3. 変更理由

従来の平坦な天面形状のABタイプでは、一次側のエアが完全に抜けきれない現象がみられる場合があり、同現象を改善するために天面を球面形状にしたADタイプへ統合いたします。

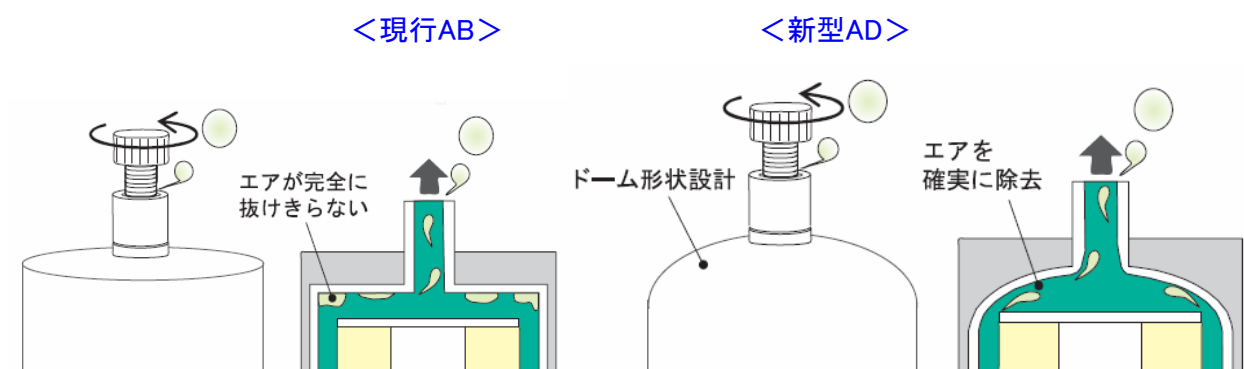

## 4. 実施時期

貴社のご理解を頂きました後に、順次切り替えを実施し、2010年9月度迄に完了の予定です。

尚、上記形状以外につきましては、一切変更はございません。

本件に関するご質問につきましては弊社下記プロセス営業部までお問合せをお願い致します。

株式会社 ロキテクノ 東日本プロセス営業部  
TEL 03-5764-1180 FAX 03-5764-0681

以上