



サートンポア

# CTYタイプ

## 用途

水溶性有機溶媒

酸、アルカリ性薬品

水系樹脂溶解液

**Ez-Change™**  
 Capsule Filter Cartridge

 当製品はカプセルフィルター  
 [Ez-Change]への装着が可能な  
 製品です。詳しくは、[Ez-Change]  
 単品カタログをご参照ください。


## 特長

- 親水性PTFE膜
- 全数簡易完全性試験実施
- 高剛性サポート材

## 利点

- プレウエット無しで表面張力の高い液体を通液可能
- 優れた耐薬品性
- 高い信頼性
- 高粘性流体における優れた流量特性


## 仕様

表示ろ過精度	002	010
ろ過精度 (μm)	0.2	1.0
ろ過面積	0.79m <sup>2</sup> /250mm	
ろ材	親水性PTFE膜	
材質	コア・カバー・サポート ポリプロピレン	
エンドキャップ	ポリプロピレン	
最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)	
最高使用温度	80℃	
全長	125/250/500/750 mm	
寸法	外径 70.0mm	
	内径 25.6 (形状0、5) / 26.1 (形状F) / 30.0 (形状7) mm	
適合食品衛生基準	昭和34年厚生省告示第370号	

※上記以外の仕様(全長・形状等)につきましては、別途ご相談ください。

## 流量特性

流体：精製水 (20°C) / フィルター全長：250mm

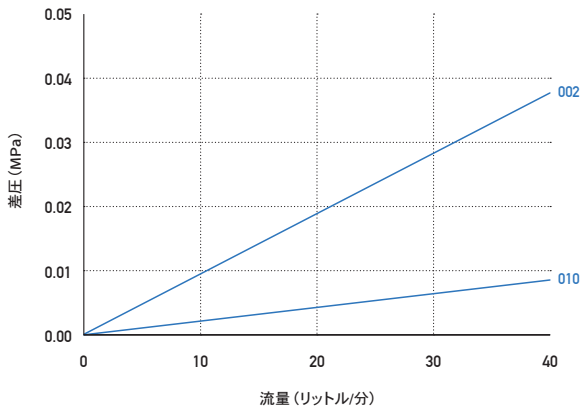

## 型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット/Oリング	形状	箱入り数
250 L	-CTY-	002	V	7	F
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		002 = 0.2 μm 010 = 1.0 μm	S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	A = 1本 B = 6本 C = 10本 F = 25本

## フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。  
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

# 株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12  
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質  
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の  
 設計・開発、製造及び販売



第5版

CTY210314J