

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge


XSタイプ

用途

ラボスケール評価、少量生産
例) コーティング液、スラリー、
インク、希少ペースト

ハウジング

交換ユニット

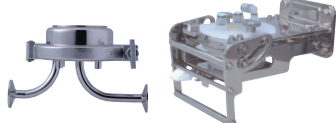

用途に合わせて選択いただけます


特長

- 交換が容易なポリプロピレン製カプセルフィルター
- Ez-Changeシリーズ最小カプセル
- ワンタッチ交換ユニット (XSES) に対応


利点

- 手に液体が付着しない
- フィルターのセットミス低減
- 液ロス量が少なく、少量でのカートリッジ評価が可能
- 交換作業の効率化

ハウジング (XSDP) の内部構造

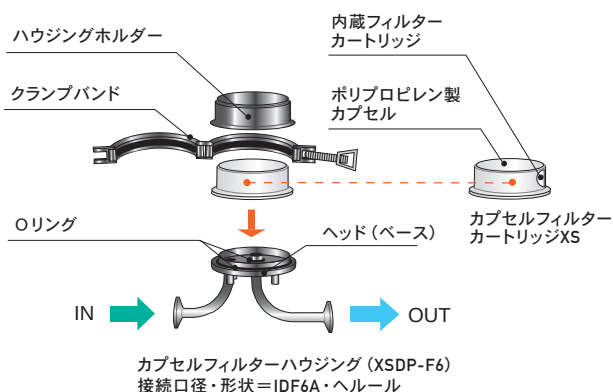

交換ユニット (XSES) の使用方法

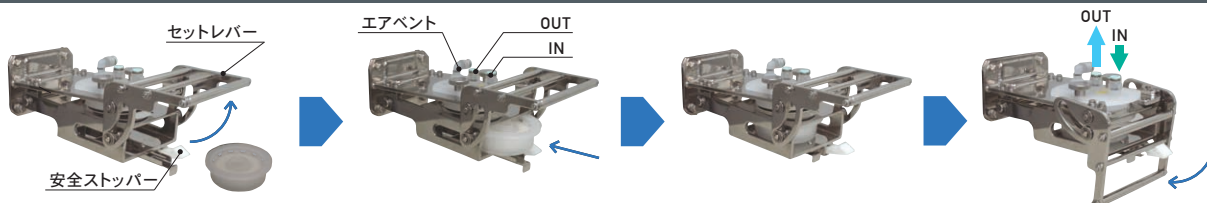

カプセルフィルターカートリッジ 仕様

カプセルフィルターカートリッジ (XS)



内蔵フィルターカートリッジ全長	20mm
内蔵フィルター数	1本
カプセル全長	30mm
カプセル最大外径	φ91mm
カプセル材質	ポリプロピレン
最高使用圧力	ハウジングまたは交換ユニットの設計圧力をご参照ください
最高使用差圧	内蔵するフィルターカートリッジのカタログをご参照ください (ただし、最高使用圧力を超えてのご使用はできません)
最高使用温度	40℃
液ロス量	42ml


※専用ハウジング/交換ユニット (XSDP/XSES) を必ずご使用ください。

カプセルフィルターカートリッジ 型番表示方法



カプセルフィルターハウジング / 交換ユニット 仕様


ハウジング (XSDP)

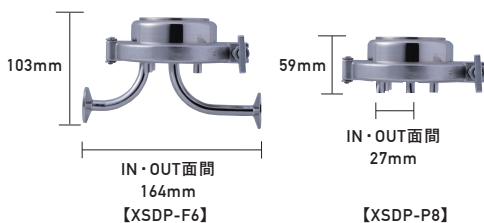


	ハウジング		交換ユニット
品番	XSDP (F6)	XSDP (P8)	XSES
対応カプセルフィルターカートリッジ品番	XS		
接続口径・形状	IDF6A・ヘルール	Rc1/4	Rc1/4 (ポート①、②、③)
ハウジング/ユニット 材質	SUS304		
Oリング材質	EPDM/シリコン/NBR/FKM/パーフロ		
設計圧力	0.98MPa		0.39MPa
設計温度	40℃		

※上記以外の接続形状・口径・寸法・及びユニット等につきましては、別途お問い合わせ下さい。

交換ユニット (XSES)

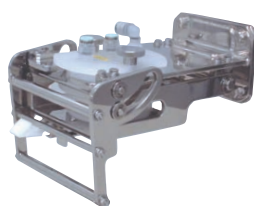

ユニット重量: 2.6kg

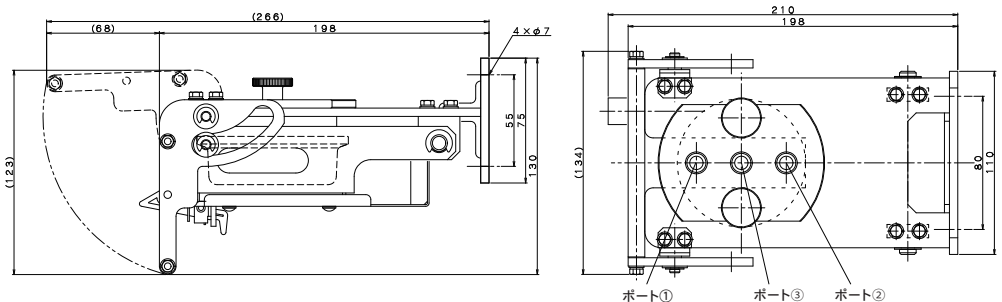

カプセルフィルターハウジング / 交換ユニット 型番表示方法



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
※有機溶剤のろ過などでご使用の際は、帯電防止策が必要になる場合があります。
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第19版
XS210324J